



Ateneo Argentino de Odontología
Unidad Operativa de la
UNIVERSIDAD FAVALORO



Arco Libre.
N. Nicastro.

<http://campus.ateneo-odontologia.org.ar>

El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia.

PLACAS CON ARCO LIBRE

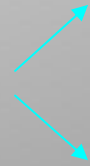
Adaptación de la aparatología fija a la removable

- . Uso de gomas de tracción anteroposterior
- . Tracción posterior del arco



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

- . Base de acrílico

- . Elementos de retención 
 - Uñas
 - Ganchos Benac

- . Arco libre 0,7mm

- . Espiral de alambre en V de PM – 0,7mm

- . Gancho en D de la placa – 1,2mm lo más
Lejos posible del último molar

- . Gomas para traccionar

- . **NO** lleva tornillo medio



INDICACIONES

Incisivos protruidos con diastemas
Retrusión sector anterior después
de la extracción de premolares

CONTRAINDICACIONES

Incisivos empinados
Retrusión en paralelo
Mordidas profundas

